

Suma Med Super LpH

Maskindiskmedel för disk- och spoldesinfektorer

Produktbeskrivning

Suma Med Super LpH är en koncentrerad specialprodukt för disk- och spoldesinfektorer. Produktens unika sammansättning gör produkten lågalkalisk samtidigt som den effektivt löser smusten i mjuka och medelhårda vatten.

Produktegenskaper

Suma Med Super LpH är ett lågalkaliskt maskindiskmedel anpassat för disk- och spoldesinfektorer. Produkten är speciellt formulerad för instrumentdisk, rondskålar, anesthesiutrustning och bidéskaalar.

Kan även användas till kärlkokare och maskindisk. Produkten är mycket skonsam mot diskgodset.

Produktfördelar

Löser effektivt smuts och intorkat blod
Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
Skonsam mot diskgodset
Motverkar kalkbildning i diskmaskinen

Bruksanvisning

Suma Med Super LpH doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 1 – 3 ml/l.

Koppla dunken till doseringsautomatiken/doseringsslangen som sedan automatiskt doserar rätt mängd. Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden. Produkten är avsedd att doseras samtidigt med vattenintag, men kan även doseras senare.

Teknisk information

Utseende:	Klar vätska
pH (1% lösning):	12.0
Densitet (20 °C):	1.18

Skyddsföreskrifter och lagring

För övrig information om hantering och förvaring hänvisas till varuinformationsblad/säkerhetsblad.


Förvara i originalförpackning. Undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan **Suma Med Super LpH** användas på dom flesta vanligen förekommande material inom sjukvården.

Förpackningsstorlekar

Artikelnummer	Förpackningsstorlek
7517689	2x5L
7517688	20L
7517690	200L

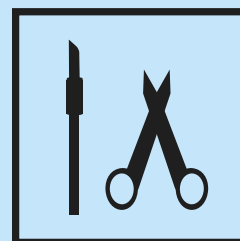

Suma Med Super LpH

Diversey Sverige AB (S)

Box 47313

Liljeholmsvägen 18

100 74 Stockholm

Tel: 08 - 77 99 300

Fax: 08 - 77 99 399

www.diversey.com

P01151SESE-02