

CP YTDES IPA 45

Ytdesinfektions- och rengöringsmedel. Med tensid

CP Ytdes IPA 45 är en användarklar isopropanolbaserat lösning för desinfektion och rengöring av alla vattentoleranta ytor. Innehåller ytaktiva ämnen (med tensid) för att ha en renande effekt.

CP Ytdes IPA 45 innehåller 45 vol-% isopropylalkohol.



— ANVÄNDINGSOMRÅDEN:

CP Ytdes IPA 45 appliceras på ytorna med hushållspapper eller en ren trasa och sprids sedan ut. Ytorna måste vara helt täckta av medlet i 60 sekunder för att ha effekt. Låt ytan torka.

— ANVÄNDNING:

Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Överensstämmer med följande europeiska standarder (mikrobiologisk effekt): **EN13727, EN13624, EN14348**

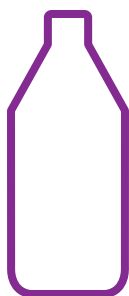
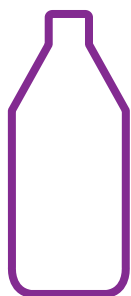
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation, H226 - Brandfarlig vätska och ångaSTOT SE 3: H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten P501: Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall



INGREDIENSER: Aktiva ingredienser i 100 g: 38 g isopropanol och 2,5 g n-propanol

pH 6,5-7,5

FÖRPACKNING:

1 000 ml flaska med automatisk återförslutningsmembran 1 000 ml flaska med snäpplock



AS Chemi-Pharm
Põllu 132, Tallinn, 10917, Estland
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com